



VALO X Colors Kit –

- 1 x VALO X LED-Polymerisationsleuchte
- 1 x Diffuser Lens
- 2 x Aufladbare Batterien
- 1 x Batterieladegerät
- 1 x Light Shield
- 1 x Musterpackung Hygieneschutzhüllen
- 1 x Netzgerät (für Batterieladegerät oder Kabeladapter*)

- **6496** HORIZON RED
- **6497** AURORA PINK
- **6498** STARDUST GRAY
- **6499** NEBULA GREEN
- **6519** TWILIGHT BLUE
- **6538** GALAXY PURPLE
- **6539** ONYX BLACK

5973 - VALO X Kit –

- 1 x VALO X LED-Polymerisationsleuchte
- 5 x Linsen
- 2 x Aufladbare Batterien
- 1 x Batterieladegerät
- 1 x Netzteil (für Batterieladegerät und Kabeladapter)
- 1 x Kabeladapter
- 1 x Handstückhalter
- 1 x Light Shield
- 1 x Musterpackung Hygieneschutzhüllen



6383 - VALO XG Kit –

- 1 x VALO XG LED-Polymerisationsleuchte
- 2 x Aufladbare Batterien
- 1 x Batterieladegerät
- 1 x Light Shield
- 1 x Musterpackung Hygieneschutzhüllen
- 1 x Netzgerät (für Batterieladegerät oder Kabeladapter*)

6470 - VALO XS Kit –

- 1 x VALO XS LED-Polymerisationsleuchte
- 2 x Aufladbare Batterien
- 1 x Batterieladegerät
- 1 x Light Shield
- 1 x Musterpackung Hygieneschutzhüllen
- 1 x Netzgerät (für Batterieladegerät oder Kabeladapter*)

Zubehör

- 4951** Batterieladegerät 1 St.
- 4952** Netzteil (Universalstecker) 1 St.
- 5189** Kabeladapter 1 St.
- 5437** Aufladbare Batterien 2 St.
- 4665** Hygieneschutzhüllen 100 St.
- 5898** Hygieneschutzhüllen 600 St.
- 508** UltraTect Brille (Schutzbrille gegen blaues Licht) 1 St.

Zubehörlinsen

ZWEI POLYMERISATIONSLINSEN		VIER DIAGNOSELINSEN			
ProxiCure® Ball Lens	PointCure® Lens	TransLume® Lens	Diffuser Lens	Interproximal Lens	White Light Lens
		(nur für VALO X)		(nur für VALO XG)	
5889 (X)	5890 (X)	5891 (X)	5892	5893 (X)	
4081 (XG)	4082 (XG)	4084 (XG)		4658 (XG)	
5936 (XS)	5934 (XS)	5937 (XS)		4629 (XS)	4628

*Kabeladapter nicht im Kit enthalten.

WILLKOMMEN IN DER FAMILIE

Die Familie der VALO X Polymerisationsleuchten bekommt Zuwachs:
Die neuen VALO XG und VALO XS Polymerisationsleuchten bieten dieselbe bewährte Langlebigkeit, Leistungsfähigkeit und den optimalen Zugang der bekannten VALO X. Sie entscheiden, welches Modell am besten zu Ihrer Praxis passt.



ÜBERZEUGENDE LANGLEBIGKEIT

Polymerisationsleuchten sind in der Praxis unverzichtbar. Sie müssen langlebig und robust im täglichen Einsatz sein. Eine nicht funktionsfähige Leuchte kann sehr ärgerlich, zeit- und kostspielig sein. Die VALO X, VALO Grand und VALO reduzieren dieses Risiko, dank ihrer einzigartigen Konstruktion.


Alle VALO Polymerisationsleuchten werden aus einem massiven, hochreinen Aluminiumstab aus der Luftfahrttechnik hergestellt. Deshalb sind sie extrem robust und langlebig. Dank der Unibody-Konstruktion bestehen keine anfälligen Verbindungspunkte. Sie ist selbst gegen starke Beanspruchung resistent und sorgt für eine optimale Wärmeableitung.



Die VALO Polymerisationsleuchten sind besonders langlebig – dafür garantieren wir. Ein regelmäßiger Austausch alle paar Jahre entfällt: die VALO Leuchten verfügen über eine 5-jährige Herstellergarantie, so dass sich die Investition wirklich lohnt.

OPTIMALER ZUGANG IN JEDER SITUATION

Das schlanke Design der VALO X, VALO XG und VALO XS ermöglicht einen einfachen Zugang zu Restaurationen im Seitenzahnbereich, ohne den Patientenkomfort zu beeinträchtigen.1 Der schlanke Leuchtenkopf kann direkt über dem Polymerisationsbereich positioniert werden, unabhängig von dessen Lage. So erreicht das Licht zuverlässig alle Bereiche der Präparation. Die verschiedenen Linsengrößen und das schlanke Design der VALO X Polymerisationsleuchten sorgt auch bei größeren Restaurationen für eine gezielte Polymerisation mit der richtigen Lichtmenge - genau dort, wo sie benötigt wird.

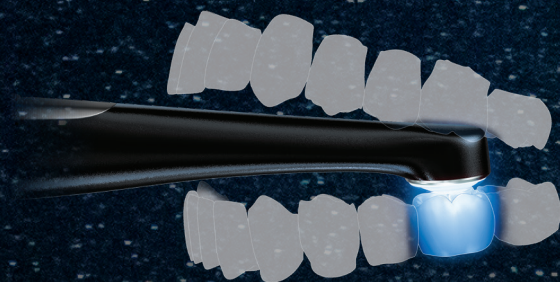

BREITBAND-LEDS

- Optimal gebündelter Lichtstrahl für eine konstante und gleichmäßige Leistung zur Aushärtung aller lichthärtenden Dentalmaterialien

BESCHLEUNIGUNGSSENSOR

- Schneller und einfacher Wechsel zwischen Polymerisations- und Diagnosemodi

VEREINFACHTES HANDLING

- Anzeige, Bedienung und Aktivierung der Polymerisations- und Diagnosemodi mithilfe der Tasten an der Geräteober- und -unterseite oder über den Beschleunigungssensor

FLEXIBLER EINSATZ

- Kabelgebundene oder kabellose Verwendung

DIE VIELFALT DER VALO X POLYMERISATIONSLAUCHTEN



LINSENGRÖSSE	12,5 MM	11,7 MM	9,7 MM
OBERFLÄCHE	123 MM²	108 MM²	74 MM²
STANDARD AUSHÄRTUNGSMODUS	1100 MW/CM² (10 SEKUNDEN)	1000 MW/CM² (10 SEKUNDEN)	1000 MW/CM² (10 SEKUNDEN)
XTRA POWER AUSHÄRTUNGSMODUS	2200 MW/CM² (5 SEKUNDEN)	2000 MW/CM² (5 SEKUNDEN)	2000 MW/CM² (5 SEKUNDEN)
ORTHO QUADRANT AUSHÄRTUNGSMODUS	—	—	2000 MW/CM² (5 X 3 SEKUNDEN)
INTEGRIERTE DIAGNOSEMODI	BLACK LIGHT (1 MIN.) WHITE LIGHT (1 MIN.)	BLACK LIGHT (1 MIN.)	BLACK LIGHT (1 MIN.)
KOMPATIBILITÄT ZUBEHÖRLINSEN	✓	✓	✓
ROBUSTE UNIBODY-KONSTRUKTION	✓	✓	✓
BREITBAND LEDS	✓	✓	✓
CORDED/CORDLESS AUSFÜHRUNG	✓	✓	✓
BESCHLEUNIGUNGSSENSOR	✓	✓	✓
5 JAHRE GARANTIE	✓	✓	✓
12 MM MOLAREN-ABDECKUNG			
STRAHLUNGS-PROFIL			